

Link do produktu: <https://rehaiq.pl/podnosnik-scienny-q140-p-81.html>

## Podnośnik ścienny Q140



### Opis produktu

**Podnośnik ścienny LeviCare Q140** jest doskonałym rozwiązaniem stosowanym w opiece nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Ułatwia i umożliwia wiele czynności np. kąpiel w wannie lub przesadzanie z łóżka na wózek.



---

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami [sklep@rehaig.pl](mailto:sklep@rehaig.pl)

**Działamy na terenie całej Polski, skontaktuj się z nami (+48 665 377 200) i umów się na darmową prezentację oraz wycenę systemu LeviCare !**

---

**Podnośnik transportowo-kąpielowy LeviCare Q140** jest doskonałym rozwiązaniem stosowanym w opiece nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Ułatwia i umożliwia wiele czynności np. kąpiel w wannie, zmianę pościeli lub przesadzanie z łóżka na wózek . Dzięki swoim niewielkim gabarytom i możliwości regulacji długości ramienia, znajdzie zastosowanie zarówno w dużych jak i w bardzo małych, trudno dostępnych pomieszczeniach, w których podnośnik jezdny nie ma możliwości manewru. Dzięki prostej zasadzie działania nie angażuje do obsługi więcej niż jednego opiekuna, odciążając go i dbając o jego własne zdrowie.

**Podnośnik ścienny** dzięki wysokiej klasie szczelności może bezpiecznie pracować w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie sprawdzi się przy przenoszeniu osoby z wózka do wanny, pod prysznic lub na toaletę. **Podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami** LeviCare Q140 łatwo dopasować do miejsca użytkowania dzięki regulowanej długości ramienia. Podnoszenie odbywa się za pomocą elektrycznego siłownika sterowanego pilotem. Do podnośnika można dopasować jeden z wielu oferowanych przez nas modeli [kamizelek LeviKam](#).

Dzięki błyskawicznemu demontażowi i stosunkowo małej masie urządzenie nadaje się do użytku w wielu pomieszczeniach.

---

**Na zakup podnośnika LeviCare Q140 można otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON aż do 95%**

---

#### Cechy szczególne podnośnika ściennego Q140:

- regulacja długości ramienia,
- różne możliwości montażowe w zależności od warunków architektonicznych pomieszczenia,
- możliwość dopasowania podnośnika w każdym, nawet małym, pomieszczeniu,
- udźwig do 140 kg oraz obrót 180 stopni,
- najlżejszy podnośnik ścienny na rynku,
- możliwość przenoszenia podnośnika między podstawami zamontowanymi w różnych pomieszczeniach,
- minimalna ingerencja w strukturę budynku
- nie wymaga remontów i przeróbek pomieszczeń
- zasilany sieciowo lub akumulatorowo
- posiada specjalne zabezpieczenie przed wysunięciem z podstawy

## Elementy systemowe Q140



**LeviCare.pl**  
PRODUCENT SPRZĘTU MEDYCZNEGO

**Wystarczy jeden podnośnik i dowolna ilość mocowań aby stworzyć system do opieki nad pacjentem.**

Innowacyjna myśl techniczna i wysoka jakość wykonania sprawiają, że urządzenie jest bezpieczne, niezawodne i funkcjonalne.



Montaż na podstawie ścienniej




Montaż na słupku: podłoga




Montaż na słupku: podłoga - sufit

## Wymiary (Rysunek 1,2)

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| R-Zasięg ramienia                                  | 940mm- 1340mm |
| B-Wysokość urządzenia                              | 735mm         |
| C-Promień obrotu                                   | 0° - 180°     |
| D-Odległość poziomej osi obrotu od ściany          | 125mm         |
| E-Odległość pionowej osi obrotu od ściany          | 65mm          |
| F-Max wysokość podnoszenia                         | 580mm         |
| G- Min. wysokość podnoszenia                       | 500mm         |
| H-Zakres podnoszenia                               | 1100mm        |
| I-szerokość podstawy                               | 60mm          |
| J-Min. odległość mocowania podstawy od sufitu      | 590mm         |
| K-Min. odległość mocowania podstawy od podłogi     | 900mm         |
| Całkowita masa (bez podstawy, wieszaka, kamizelki) | 12kg          |
| Max. obciążenie                                    | 140kg         |
| Siła potrzebna do obsługi pilota                   | ≤5N           |
| Poziom hałasu                                      | ≤44dB         |

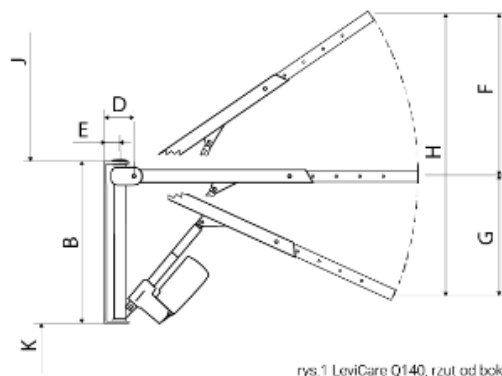

rys.1 LeviCare Q140, rzut od boku

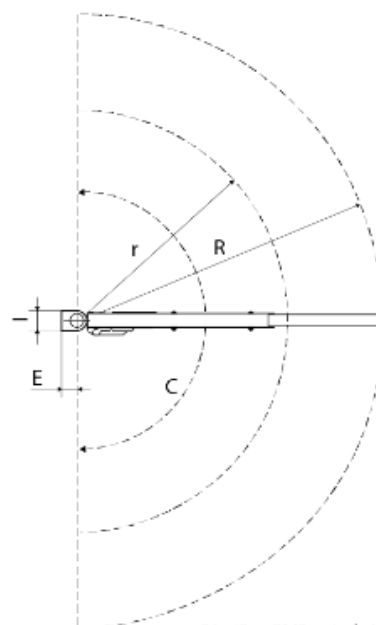

rys.2 LeviCare Q140, rzut od góry

## Dane elektryczne

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prąd zasilający skrzynkę kontrolną     | 230V AC, 50Hz, 1000mA                                       |
| Prąd wychodzący ze skrzynki kontrolnej | 24V DC, 100VA (Max )                                        |
| Prąd zasilający siłownik               | 24V DC                                                      |
| Max. pobór prądu (siłownik)            | 7A                                                          |
| Klasa szczelności skrzynki kontrolnej  | IP66                                                        |
| Klasa szczelności siłownika            | IP66                                                        |
| Klasa szczelności pilota               | IP54                                                        |
| Cykl pracy                             | 10% lub 1 minuta pracy ciągłej, a następnie 9 minut przerwy |

---

**Producent:** Levicare Sp. z o. o.

**Dystrybutor i reklamodawca:** LIW Care Technology Sp. z o. o.